

orthocare



orthocare®

Ortopedi
ve
Sporcu Sağlığı
Ürünleri

İçindekiler

Materyaller

- 3 Comfort örme
- 4 Air-X
- 5 Comfort polipropilen
- 5 Comfort microfiber

Yakın Bakış

- 7 Genucare ROM

Ürünler

- 9 Premium serisi
- 21 Kids / Çocuk serisi
- 23 Basic & Sports serisi

Markamız

orthocare® size ne sunar?

- Anatomik olarak tasarlanmış fonksiyonel destekler
- Yüksek teknoloji ile ortopedi ve spor amaçlı üretilmiş özellikli malzemeler (Air-X, comfort örme, comfort polipropilen, comfort microfiber serileri)
- Geniş ürün yelpazesi
- Yüksek hasta uyumu sağlayan geniş beden seçeneği
- Kullanıcı konforu ve tasarım şıklığı
- Mümkün olan en iyi tedaviyi sağlayacak ürün fonksiyonelliği
- Üretimin her aşamasında gösterilen duyarlılık ve kontrolle ulaşılan yüksek kaliteli ürünler.

Biz kimiz?


Arden Medikal

Ortopedi ve rehabilitasyon grubunda üretime başladığımız 2004 yılından bu yana, kendi markamıza yatırım yaparak, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınan bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz.

Marka yatırımlarına ara vermeden, sürekli yeni ürün geliştirerek ve teknolojik yenilikleri uygulayarak, ihracat ağıımızı genişletmeye devam ediyoruz.

Hedefimiz, standartların üzerine çıkıp, sizlere daima yenilikleri sunmaktır.

Materyaller

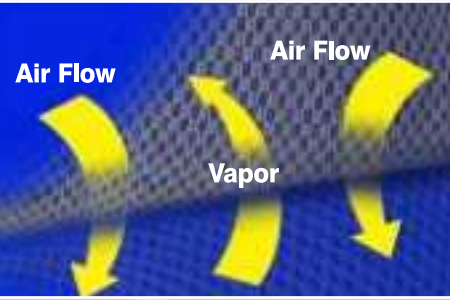

- Comfort örme teknolojisi ile üretilen özel ürünlerdir.
- Nefes alabilen, hava geçirgen yapısı ile kullanıcıya uzun süreli mükemmel bir rahatlık ve uyum sunar.
- Kompresyon özelliği ve masaj etkisi yaratan pedleri ile son derece konforludur.
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, vücudun kıvrılıp bükülmesi gereken yerlerde buna izin verecek özellikte tasarlanmıştır.
- Elastik özelliği ile giyim kolaylığı sağlar, kullanıcı uyumu mükemmeldir.

Comfort Örme

Nefes alan örme teknolojisi

3920 Epicare **Comfort plus**



3910 Epicare **Comfort**



4910 Manucare **Comfort**



2910 Lumbocare **Comfort**



6920 Genucare **Comfort plus**



6910 Genucare **Comfort**



7910 Malleocare **Comfort**




7920 Achicare **Comfort**



Materyaller

AirX

İnovatif, akıllı dokuma

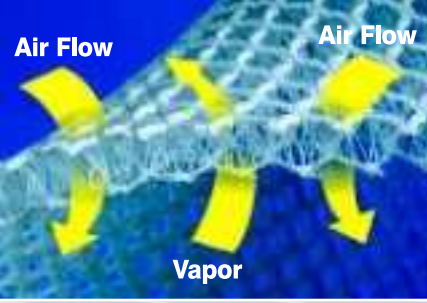


AirX yüksek teknoloji ile üretilen özel bir dokumadır. Nefes alabilen, hava geçirgen yapısı ile kullanıcıya mükemmel bir rahatlık ve uyum sunar. AirX ile üretilen destekler, diğer malzemelerin aksine, cildin terlemesiyle oluşabilecek problem ve rahatsızlıklara neden olmaz. AirX, ortopedi ve sporcu sağlığı için mükemmel bir çözümdür.

Özellikleri:

- 4-yöne esneyebilir
- yüksek hava geçirgenliği sağlar
- nem transferi yapar
- hafiftir
- latex içermez
- ısıyı ayarlar
- yüzeyi dayanıklıdır
- yıkanabilir.

6741 GenucareAirX patella

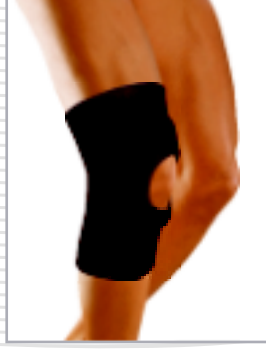

6730 GenucareAirX ligament



6750 GenucareAirX stable



6755 GenucareAirX stable open



6760 GenucareAirX hyperX



COMPRESSION

Materyaller



- Nem tutmaz: polipropilen su itici özelliği olan bir polimerdir
- Nefes alır: terleme ile oluşan nemin dokumadan geçmesini ve bedenin hava almasını sağlar
- Hijyeniktir, alerji yapmaz, anti-bakteriyel özellik gösterir
- Polimer yapısı nedeniyle kir ve leke tutmaz
- Güneş ışınlarına dayanıklıdır: UV katkı maddesi kullanılarak güneşin zararlı ışınlarının malzemeyi etkilemesinin önüne geçilir.

Comfort Polypropylene

Nefes alan dokuma

4515 Manucare Comfort



4525 Manucare Comfort plus



4545 Manucare Comfort stable



4535 Thenarcare Comfort



Comfort Microfibre

- Nefes alır: terleme ile oluşan nemin dokumadan geçmesini ve bedenin hava almasını sağlar
- Cilde dosttur, bu amaçla kullanılan diğer bütün stokinetlerden çok daha konforlu ve dayanıklıdır
- Kullanıcıya mükemmel bir rahatlık sunar

1170 Reinforced collar Comfort



1180 Soft collar Comfort



Yakın Bakış

Orthopaedics





Fleksiyon/extansiyon
limitli açı ayarlı
dizlik

Extansiyon açıları:
-15°, 0°, 15°, 30°,
45°, 60°, 75°

Fleksiyon açıları
0°, 15°, 30°, 45°, 60°,
75°, 90°, 105°, 120°

Genucare ROM

6320 Genucare ROM



Endikasyonlar:

- . post operative immobilizasyon
- . diz yaralanmaları sonrası immobilizasyon
- . yaralanmış bağların stabilizasyonu

Etki Mekanizması

- . immobilizasyon
- . kontrollü hareket/mobilizasyon
- . diz eklemine kolleteral stabilizasyonu

Özellikler:

- . cilde dost, hava alabilen yumuşak bantlar
- . kolay ayarlanabilen ROM eklem
- . kırılarak boy kısaltmasına olanak sağlayan yan barlar
- . fleksiyon ve ekstansiyonda geniş açı aralığı

Premium Serisi


OrthoCare





1170 Reinforced collar

Plastik destekli sünger boyunluk

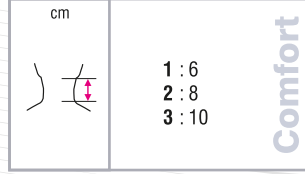

Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikolis

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki eklem yapılarını ve kasları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini her yöne kısmen limitler.


Özellikler

Hava geçirgen mikrofiber dokuma, yüksek yoğunluklu dayanıklı sünger, polietilen destek



1180 Soft collar

Sünger boyunluk

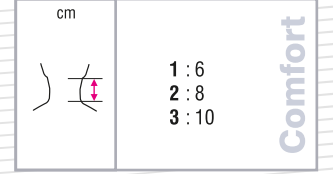

Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikolis

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki yumuşak dokuları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini her yöne çok az limitler.


Özellikler

Hava geçirgen mikrofiber dokuma, yüksek yoğunluklu dayanıklı sünger



1330 Clavicare

Klavikula tespit bandajı

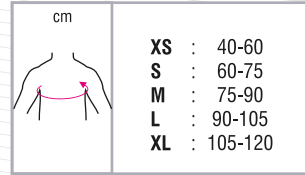

Endikasyon

Klavikula kırıklarında, omuz eklemi yaralanmalarında.

Etki Mekanizması

Omuzları normal pozisyonunda tutarak klavikula kırıklarında iyileşmeye destek olur, omurganın dik tutulmasını sağlar.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, sırt üstü yatarken bile konforlu



1741 Velpocare uni

Omuz stabilizasyon ortezi

universal

Endikasyon

Humerus kırıklarında, omuzun tam stabilizasyonu için

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon /dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.


Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, göğüs bandı ile ekstra stabilizasyon



3510 Armsling velcro

Kol askısı

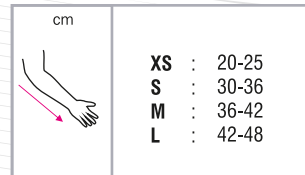

Endikasyon

Subakromial dekompresyon, genel omuz instabilitesi, omuzu ilgilendiren yaralanma ve incinmeler, rotator cuff yaralanmaları, minor humerus kırıkları, cerrahi sonrası immobilizasyon

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin

inferior subluksasyon

/dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, göğüs bandı ile ekstra stabilizasyon, başparmak askısı ile daha rahat kullanım



3511

Shoulder abduction 15

Omuz abduksiyon yastığı 15°

universal

Endikasyon

Post-operatif immobilizasyon, rotator cuff tamiri sonrası, sub-akromial dekompresyon, konservatif omuz tedavisinde immobilizasyon

Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için 15 derece abduksiyonda özel bir pozisyonlama sağlar,

omuz subluksasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, ayrılabilir kol askısı



3512

Shoulder abduction 30/45

Omuz abdüksiyon yastığı 30/45°

universal

Endikasyon

Post-operatif immobilizasyon, rotator cuff tamiri sonrası, sub-akromial dekompresyon, konservatif omuz tedavisinde immobilizasyon

Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için 30 ya da 45 derece abdüksiyonda özel bir pozisyonlama sağlar,

omuz subluksasyonunu önleyici bir etki yaratır

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, ayrılabilir kol askısı, 30 ya da 45 derecede opsiyonel pozisyonlama.



3513

Shoulder abduction lateral

Omuz abdüksiyon yastığı 90°

universal

Endikasyon

Post-operatif immobilizasyon, rotator cuff tamiri sonrası, sub-akromial dekompresyon, konservatif omuz tedavisinde immobilizasyon

Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için, yanlarda 90 derece abdüksiyonda özel bir pozisyonlama sağlar, omuz

subluksasyonunu önleyici bir etki yaratır

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, ayrılabilir kol askısı, özel şekillendirilmiş yastıkla mükemmel pozisyonlama.



1335 Acromio clavicare

Acromio klavikula ortezi

universal

Endikasyon

Akromioklaviküler eklemin çıkık, zorlanma ve yaralanmalarında.

Etki Mekanizması

Omuzları normal pozisyonunda tutarak klavikula kırıklarında iyileşmeye destek olur.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi



3910 Epicare Comfort

Epikondilit destekli, örme dirseklik

cm



S	: 20-23
M	: 23-27
L	: 27-30
XL	: 30-32
XXL	: 32-35

Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit, tenisçi dirseği

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, tendonlardaki gerginliği azaltır, silikon ped ile

dirsek çevresi yumuşak dokuları destekler, proprioseptif destek sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak örülmüş yapı ve yanlarda destekleyici silikon pedler, dirsek ve dirsek içine gelen extra konforlu bölgeler, yüksek esnekliğe sahip, hava geçirgen comfort örme sistemi



3920 Epicare Comfort plus

Epikondilit destekli örme dirseklik ekstra bantlı

cm



S	: 20-23
M	: 23-27
L	: 27-30
XL	: 30-32
XXL	: 32-35

Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit, tenisçi dirseği

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, tendonlardaki gerginliği azaltır, silikon ped ve extra bant ile yumuşak dokuları destekler, proprioseptif destek sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak örülmüş yapı ve yanlarda destekleyici silikon pedler, dirsek ve dirsek içine gelen extra konforlu bölgeler, kompresyonu ayarlanabilen epikondilit bandı, yüksek esnekliğe sahip hava geçirgen comfort örme sistemi.



3110 Epicare brace

Epikondilit ortezi

universal

Endikasyon

Medial ve lateral epikondilit, epikondilitis humeri (tenisçi dirseği)

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, proprioseptif destek sağlar.

Özellikler

Yenilikçi, kullanımı kolay ve etkili tasarım, kompresyonu ayarlanabilen velcro sistemi ve portatif ped.



3120 Epicare

Epikondilit bandı (tek pedli)

universal

Endikasyon

Medial ve lateral epikondilit, epikondilitis humeri (tenisçi dirseği)

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, proprioseptif destek sağlar.

Özellikler

Basit, kullanımı kolay ve etkili tasarım, kompresyonu ayarlanabilen velcro sistemi ve portatif ped



4910 Manucare Comfort C

El bilek ateli

cm	sol/sağ
	XS : 13-14
	S : 14-16
	M : 16-18
	L : 18-20
	XL : 20-22

Endikasyon

El bileği zorlanmaları, alt uç kırıkları alçı sonrası, tenosinovit, karpal instabiliter

Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır, comfort örme proprioseptif etki yaratır.

Özellikler

Anatomik yapıya uygun örülen hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, bileği çevreleyen velcro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, şekillendirilebilir termoplastik splint



4515 Manucare Comfort

El bilek ateli

cm	sol/sağ
	XS : 14-15
	S : 15-16,5
	M : 16,5-18
	L : 18-19,5
	XL : 19,5-21
	XXL : 21-22,5

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabiliter, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



4525 Manucare Comfort plus

Başparmak destekli el bilek ateli

cm	sol/sağ
	XS : 14-15
	S : 15-16,5
	M : 16,5-18
	L : 18-19,5
	XL : 19,5-21
	XXL : 21-22,5

Endikasyon

MCP eklem sorunları, CMC eklem dejenerasyonları, dequarvein, karpal tünel ve dequarveinin beraber olduğu durumlar

Etki Mekanizması

Bileği ve başparmağı destekler.

Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el, bilek ve başparmağa tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



4535 Thenarcare Comfort

Başparmak tespit ateli

cm	sol/sağ
	XS : 12-14
	S : 14-16
	M : 16-18
	L : 18-20
	XL : 20-22

Endikasyon

Başparmağın dejeneratif durumları, dequarvein, osteoartrit, travmatik problemler

Etki Mekanizması

Başparmağın CMP ve MCP eklemlerini destekler.

Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş bilek ve başparmağa tam oturan ve rahatlık sağlayan yapı, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi.



4545 Manucare Comfort stable

El bilek ateli ekstra destek bantlı

cm	sol/sağ
	XS : 14-15
	S : 15-16,5
	M : 16,5-18
	L : 18-19,5
	XL : 19,5-21
	XXL : 21-22,5

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabiliter, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, ekstra bant ve geniş atelle daha fazla destek sağlar, başparmağın

hareketine olanak tanır.

Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, ekstra kompresyon ve destek sağlayan, ayarlanabilen velcro sistemli geniş bilek bandı, geniş ve şekillendirilebilir termoplastik splint



1320 Posturecare

Dik duruş korsesi

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100

Endikasyon

Postür desteği olarak, postür bozuklukları, omuz ve sırt kaslarının zayıflığı

Etki Mekanizması

Sırt bölgesinin doğru duruş şekli ile dik tutulmasına destek olur, sırt kasları için proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir omuz bantları, hareketi hafif sınırlayan konforlu spiral balenler



4000 Backtone

Elektronik sensörlü dik duruş korsesi (sesli ya da titreşimli uyarı)

cm	
	S : 50-85 M : 60-100 L : 90-132

Endikasyon

Postür desteği olarak, postür bozuklukları, omuz ve sırt kaslarının zayıflığı

Etki Mekanizması

Sesli ya da titreşimli uyarı modu ile öne doğru kamburlaştığınız anda uyarır ve duruşun düzeltilmesini sağlar

Özellikler

Sesli ya da titreşimli uyarı özelliği, hareket özgürlüğü sağlayan kullanımı kolay, dayanıklı askılar, kauçuk destekli bel bandı ile pozisyonu korunan sensör, hafif, şık ve konforlu tasarım.



1710 Sternicare

Göğüs korsesi (fleksible balenli)

1711 Sternicare plus

Göğüs korsesi (çelik balenli)

cm	
	S : 95-105 M : 85-95 L : 75-85 XL : 65-75 XXL : 105-115

Endikasyon

Sternum ameliyatı sonrası, sternum stabilizasyonu gereken durumlarda.

Etki Mekanizması

Sternoklaviküler eklemler ile göğüs kafesini stabilize eder, ısı etkisi ve proprioseptif etki ile cerrahi sonrası iyileşmeyi destekler.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir omuz bantları.



2550 Dorsocare

Dorsolomber bel korsesi (çelik balenli)

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Torakal ve lumbal bölge stabilizasyonu için, postoperatif immobilizasyon, akut ve kronik lumbago.

Etki Mekanizması

Tüm omurgayı destekler ve doğru pozisyonda tutar, omurga hareketlerini tüm yönlerde kısmen limitler,

proprioseptif geri bildirim sağlar.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlayan çelik balenler



2530 Lumbocare light

Lumbosakral bel korsesi (fleksible balenli)

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler, akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi hafif sınırlayan plastik balenler



2540 Lumbocare high

Uzun lumbosakral bel korsesi (çelik balenli)

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler, akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlayan çelik balenler



2910 Lumbocare Comfort C

Örme lumbosakral bel korsesi
(çelik balenli)

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler, akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikler

Nefes alabilen örme sistemi, anatomik olarak tasarlanmış örme sayesinde yüksek hasta uyumu, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, hareketi sınırlandıran çelik balenlerle ekstra stabilizasyon



2110 Dasicare

Lumbosakral bel korsesi (fleksible balenli)

2130 Dasicare plus

Lumbosakral bel korsesi (çelik balenli)

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, dorsal kas zayıflıkları, propriosepsiyonun arttırılması gereken durumlar.

Etki Mekanizması

Bel bölgesindeki eklem ve kas yapılarını destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, bel bölgesinde özellikle fleksiyon

ve ekstansiyon yönündeki hareketleri limitler.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve dayanıklı esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, parçalı ön bantlar ile sağlanan yüksek konfor ve uyum, hareketi hafif sınırlandıran plastik balenler



2510 Abdominocare

Karın korsesi

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Abdominal bölge operasyonu sonrası

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler. Abdominal duvarı korur ve cerrahi sonrası iyileşmeyi destekler.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi



6910 Genucare Comfort

Patella destekli, flexible balenli örme dizlik

	A	B
XS	41-43	28-31
S	43-46	31-34
M	46-49	34-37
L	49-52	37-40
XL	52-56	40-43
XXL	56-58	43-46

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Elastik örme dokumanın sağladığı kompresyon ve patella pedi sayesinde diz kapağı ve ekleminin stabilitesinin artırılmasını ve

desteklenmesini sağlar, comfort örme proprioseptif etki yaratır.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş popliteal bölge dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda spiral balenler



6920 Genucare Comfort plus

Patella destekli, flexible balenli örme dizlik (ekstra bantlı)

	A	B
XS	41-43	28-31
S	43-46	31-34
M	46-49	34-37
L	49-52	37-40
XL	52-56	40-43
XXL	56-58	43-46

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Elastik örme dokumanın sağladığı kompresyon ve patella pedi sayesinde diz kapağı ve ekleminin stabilitesinin artırılmasını ve desteklenmesini sağlar,

comfort örme proprioseptif etki yaratır.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş popliteal bölge dokuması ve dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda spiral balenler



6741 Genucare AirX patella

Patella destekli Air-X dokuma dizlik

cm	
S	30-33
M	33-36
L	36-39
XL	39-42
XXL	42-45

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Diz kapağı ve diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı

destekler, Air-X kumaş proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş ile yüksek hasta uyumu ve daha rahat kullanım



6730 Genucare AirX ligament

Patella destekli, flexible balenli Air-X dokuma dizlik

cm	
S	30-33
M	33-36
L	36-39
XL	39-42
XXL	42-45

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, Air-X kumaş proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, giyim kolaylığı, dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda spiral balenler.



6760 Genucare AirX hyperX

Hiper ekstansiyonu engelleyen polisentrik eklemlerli Air-X dokuma dizlik

cm	
S	30-33
M	33-36
L	36-39
XL	39-42
XXL	42-45

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, Air-X kumaş proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, giyim kolaylığı, arkada hiper-ekstansiyonu engelleyen çapraz bantlar, önde daha fazla hasta uyumu için esnek velkro bantlar, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklemler



6750 Genucare AirX stable

Patella destekli, polisentrik eklemlili Air-X dokuma dizlik

cm	
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, Air-X kumaş

proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, giyim kolaylığı, dizliği çevreleyen velcro bantlarla daha fazla hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklemler



6755 Genucare AirX open

Polisentrik eklemlili Air-X dokuma dizlik (önden açık model)

cm	
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, Air-X kumaş

proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, önde kapanan pratik velcro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklemler



6320 Genucare ROM

Fleksiyon/ekstansiyon limitli açılabilir dizlik

Ekstansiyon Açıları:	
-15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	
Fleksiyon Açıları:	
0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°	
universal	

Endikasyon

Postoperatif immobilizasyon, diz yaralanmaları sonrası immobilizasyon, yaralanmış bağların stabilizasyonu

Etki Mekanizması

immobilizasyon kontrollü hareket/mobilizasyon diz ekleminin kollateral stabilizasyonu

Özellikler

Cilde dost, hava alabilen yumuşak bantlar, kolay ayarlanabilen ROM eklemler, kırılarak boy kısaltmasına olanak sağlayan yan barlar, fleksiyon ve ekstansiyonda geniş açılabilir, universal tek beden.



6310 Genucare immobiliser

Diz immobilizeri

cm	
S	: 40
M	: 50
L	: 60

Endikasyon

Postoperatif immobilizasyon, menisküs yaralanmaları, ACL, PCL yaralanmaları

Etki Mekanizması

Dizin immobilize edilmesini sağlar, patellafemoral eklemler üzerindeki basıncı azaltır.

Özellikler

Pratik velcro sistemi ile ayarlanabilir bantlar, cilde dost yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, çıkarılabilir lateral ve medial splintler.



7910 Malleocare Comfort

Malleol destekli, örme ayak bilekliği

cm	
XS	: 17-20
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, eklemler effüzyonu

Etki Mekanizması

Elastik comfort örme proprioseptif etki sağlar, malleol bölgedeki pedler masaj etkisi ile kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, bileği stabilize eder.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş bilek kıvrım dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda masaj etkisi yaratan pedler



7920 Achicare Comfort

Aşıl destekli örme ayak bilekliği

cm	
XS	: 17-20
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Aşiller tendonunun akut ve kronik inflamasyonu, postoperatif ve posttravmatik enflamasyon, aşilodoni, aşıl bursiti

Etki Mekanizması

Elastik comfort örme proprioseptif etki sağlar, aşıl bölgedeki pedler masaj etkisi ile kan dolaşımını artırır ve

sertliği azaltır, bileği stabilize eder.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş bilek kıvrım dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda masaj etkisi yaratan pedler

Kids / Çocuk Serisi

OrthoCare





1339 Clavicare kids

Klavikula desteği

age	S : 3-6 M : 6-10
-----	-----------------------------------

Endikasyon

Klavikula kırıklarında, omuz eklemi yaralanmalarında.

Etki Mekanizması

Omuzları normal pozisyonunda tutarak klavikula kırıklarında iyileşmeye destek olur, omurganın dik tutulmasını sağlar.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, sırt üstü yatarken bile konforlu



1749 Velpocare kids

Omuz immobilizeri

age	S : 3-6 M : 6-10
-----	-----------------------------------

Endikasyon

Humerus kırıklarında, omuzun tam stabilizasyonu için

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon /dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, göğüs bandı ile ekstra stabilizasyon



3519 Armsling kids

Kol askısı

age	S : 3-6 M : 6-10
-----	-----------------------------------

Endikasyon

Subakromial dekompresyon, genel omuz instabilitesi, omuzu ilgilendiren yaralanma ve incinmeler, rotator cuff yaralanmaları, minor humerus kırıkları, cerrahi sonrası immobilizasyon

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin

inferior subluksasyon

/dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, göğüs bandı ile ekstra stabilizasyon, başparmak askısı ile daha rahat kullanım



4519 Manucare kids

El bilek ateli ekstra destek bantlı

cm	left/right
	S : 10-11,5 M : 11,5-13 L : 13-14,5

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabiliteler, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, ekstra bant ve geniş atelle daha fazla destek sağlar, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, ekstra kompresyon ve destek sağlayan, ayarlanabilen velcro sistemli bilek bandı, geniş ve şekillendirilebilir termoplastik splint.



6319 Genucare immobiliser kids

Diz immobilizeri

cm	S : 20 M : 25 L : 32
----	---

Endikasyon

Postoperatif immobilizasyon, menisküs yaralanmaları, ACL, PCL yaralanmaları

Etki Mekanizması

Dizin immobilize edilmesini sağlar, patellafemoral eklemin üzerindeki basıncı azaltır.

Özellikler

Pratik velcro sistemi ile ayarlanabilir bantlar, cilde dost yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, çıkarılabilir lateral ve medial splintler.



5010 Pavlic harness Ida

Pavlik bandajı

ay	S : 2-6 M : 4-8 L : 6-9
----	--

Endikasyon

Konjenital kalça subluksasyonu yada dislokasyonu, 9 aylığa kadar olan bebeklerde görülebilen konjenital displazisi ve kalça eklemi dislokasyonları

Etki Mekanizması

Kalçayı fleksiyon ve abduksiyonda tutar, asetebulmda femuru merkezi pozisyonunda tutar.

Özellikler

Bebeği incitmeyen, konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı takılıp çıkarılabilen pratik velcro sistemi, özel tasarım ayak bölümü ile ekstra stabilizasyon.



5011 Pavlic bandage

Pavlik bandajı

ay	S : 2-6 M : 4-8 L : 6-9
----	--

Endikasyon

Konjenital kalça subluksasyonu yada dislokasyonu, 9 aylığa kadar olan bebeklerde görülebilen konjenital displazisi ve kalça eklemi dislokasyonları

Etki Mekanizması

Kalçayı fleksiyon ve abduksiyonda tutar, asetebulmda femuru merkezi pozisyonunda tutar

Özellikler

Toka/kilit sistemi ile ayarlanabilir bantlar.



5020 Hip abduction brace

Kalça abdüksiyon ortezi

pevlik ölçüsü (cm)	XS : 35-40 S : 40-45 M : 45-50 L : 50-55
--------------------	---

Endikasyon

Konjenital kalça subluksasyonu yada dislokasyonu, konjenital displazisi ve kalça eklemi dislokasyonları

Etki Mekanizması

Kalçayı fleksiyon ve abduksiyonda tutar, aynı zamanda yürümeye de izin verir

Özellikler

Kalçanın pozisyonu koruyacak kadar rijit, harekete izin verecek kadar esnektir. Konfor sağlayan plastrozot yastıklarla desteklenmiştir.



5030 Hip abduction Adil Surat

Adil Surat tipi kalça abdüksiyon ortezi

ay	S : 2-6 M : 4-8 L : 6-10
----	---

Endikasyon

Femur başının asetabulum içindeki normal santralizasyonu, femur başının avasküler nekroz oluşumunun önlenmesi, kalçaların fleksiyon, abduksiyon ve iç rotasyonda tutulmasını gerektiren durumlar

Etki Mekanizması/Özellikler

Ortezin plastik kısımları her iki alt ekstremitede dizleri içine alarak uyluk ve baldır ortasına kadar uzanır, diz eklemleri 30-40 derece fleksiyonda pozisyonlanır, abduksiyon açısı alüminyum abduksiyon barı ile ayarlanabilir, kalça fleksiyonu ile birlikte rotasyonunda da etkindir.

Basic & Sport Serisi

Ortopedi





1190 Nelson collar

Nelson tipi boyunluk

	A	B
0 : 8-10	30-40	
1 : 8-10	35-45	
2 : 8-10	40-50	
3 : 8-10	45-55	

Endikasyon

Servikal disk hernisi, servikal kas zorlanması/spazmları, postoperatif, boyundaki yapısal bozukluklar

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki artiküler yapı ve kasları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini ön-arka yönde kısmen limitler.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş X-ray geçirgen plastozot



1160 Philadelphia collar

Philadelphia boyunluk

	A	B
0 : 4		
1 : 6		
2 : 8		
3 : 10		

Endikasyon

Servikal travmalar, ameliyat öncesi ve sonrası, servikal stabilizasyon gereken durumlar, yumuşak doku hasarları

Etki Mekanizması

Boyun bölgesini stabilize eder, ısı etkisi yaratır ve boyun bölgesindeki yumuşak dokuları destekler.

Özellikler

Ön ve arka bölümleri anatomik olarak şekillendirilmiş, X-ray geçirgen plastozot



1150 Vitrafix collar

Çenelikli vitraten boyunluk

	A	B
1 : 6-8	30-40	
2 : 6-8	35-45	
3 : 8-10	40-50	
4 : 8-10	45-55	

Endikasyon

Servikal kas zorlanması (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikolis

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki artiküler yapı ve kasları destekler, boyun hareketlerini ön-arka yönde kısmen limitler.

Özellikler

Yüksek yoğunluk polietilen, konfor sağlayan ekstra yumuşak deri kaplı kenarlar



1140 Vitra collar

Çeneliksiz vitraten boyunluk

	A	B
1 : 6-8	30-40	
2 : 6-8	35-45	
3 : 8-10	40-50	
4 : 8-10	45-55	

Endikasyon

Servikal kas zorlanması (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikolis

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki artiküler yapı ve kasları destekler, boyun hareketlerini ön-arka yönde kısmen limitler.

Özellikler

Yüksek yoğunluk polietilen, konfor sağlayan ekstra yumuşak deri kaplı kenarlar



1181 Soft collar Eco

Sünger boyunluk

	A	B
1 : 6		
2 : 8		
3 : 10		

Endikasyon

Servikal kas zorlanması (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikolis

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki yumuşak dokuları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini her yöne çok az limitler.

Özellikler

Pamuk dokuma, yüksek yoğunluklu dayanıklı sünger



3410 Armsling classic

Kol askısı

cm	
S :	30-36
M :	36-42
L :	42-48

Endikasyon

Humerus kırığı, omuz yaralanmaları, kolun stabilizasyonunu gerektiren durumlar, önkolun alçılı durumları

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon /dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Dayanıklı ve ayarlanabilir bantlar, hafif kumaş



3411 Armsling light

Kol askısı

cm	
S :	30-36
M :	36-42
L :	42-48

Endikasyon

Humerus kırığı, omuz yaralanmaları, kolun stabilizasyonunu gerektiren durumlar, önkolun alçılı durumları

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon /dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Dayanıklı ve ayarlanabilir bantlar, hava alabilen hafif ve konforlu kumaş



3130 Epicare active

Dirseklik

cm	
S :	20-23
M :	23-27
L :	27-30
XL :	30-32
XXL :	32-35

Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı

Etki Mekanizması

Dirsek eklemi için geniş düzeyli bir destek sağlar, dirsek bölgesi yumuşak dokuları

destekler, ısı özelliği ile iyileşme süreçlerine yardımcı olur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, basit ve kullanışlı tasarım



3135 Epicare active plus

Epikondilit destekli dirseklik

cm	
S :	20-23
M :	23-27
L :	27-30
XL :	30-32
XXL :	32-35

Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit, tenisçi dirseği

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, dirsek çevresi yumuşak dokuları destekler, proprioseptif destek sağlar, ısı özelliği ile iyileşme süreçlerine yardımcı olur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, kompresyonu ayarlanabilen portatif velkro sistemli epikondilit bandı ve pedler, daha fazla uyum için ayarlanabilir üst kol genişliği



3911 Epicare Easy

Örme dirseklik

cm	
S :	20-23
M :	23-27
L :	27-30
XL :	30-32
XXL :	32-35

Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit.

Etki Mekanizması

Dirsek çevresi yumuşak dokulara destek sağlar, proprioseptif etki gösterir.

Özellikler

Anatomik olarak örülmüş yapı, dirsek ve dirsek içine gelen extra konforlu bölgeler, yüksek esnekliğe sahip, hava geçirgen örme sistemi



3125 Epicare plus

Epikondilit bandı (çift pedli)

cm	
S :	20-23
M :	23-27
L :	27-30
XL :	30-32
XXL :	32-35

Endikasyon

Medial ve lateral epikondilit, epikondilitis humeri (tenisçi dirseği)

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, proprioseptif destek sağlar.

Özellikler

Kullanımı kolay ve etkili tasarım, kompresyonu ayarlanabilen velkro sistemi ve portatif pedler

universal



4330 Thenarcare form

Termoplastik destekli başparmak tespit ateli

cm	sol/sağ
	XS : 13-14 S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Endikasyon

Başparmağın dejeneratif durumları, dequarvein, osteartirit, travmatik problemler

Etki Mekanizması

Başparmağın CMP ve MCP eklemlerini destekler.

Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi



4325 Manucare form

Termoplastik destekli el bilek ateli

cm	sol/sağ
	S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabilite, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

El bileğini volar ve dorsaldan

destekler, stabilize eder.

Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi



4511 Manucare D

El bilek ateli

cm	sol/sağ
	XS : 14-15 S : 15-16,5 M : 16,5-18 L : 18-19,5 XL : 19,5-21 XXL : 21-22,5

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabilite, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



4521 Manucare D plus

Başparmak destekli el bilek ateli

cm	sol/sağ
	XS : 14-15 S : 15-16,5 M : 16,5-18 L : 18-19,5 XL : 19,5-21 XXL : 21-22,5

Endikasyon

MCP eklem sorunları, CMC eklem dejenerasyonları, dequarvein, karpal tünel ve dequarveinin beraber olduğu durumlar

Etki Mekanizması

Bileği ve başparmağı destekler.

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



4531 Thenarcare D

Başparmak tespit ateli

cm	sol/sağ
	XS : 12-14 S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Endikasyon

Başparmağın dejeneratif durumları, dequarvein, osteoartirit, travmatik problemler

Etki Mekanizması

Başparmağın CMP ve MCP eklemlerini destekler.

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş başparmak ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint.



4541 Manucare D stable

El bilek ateli ekstra destek bantlı

cm	sol/sağ
	XS : 12-14 S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabilite, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, ekstra bant ve geniş atelle daha fazla destek sağlar, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



2531 Lumbocare Eco light

Lumbosakral bel korsesi
(fleksible/metal balenli)

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler.

Akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikler

Esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlandıran metal balenler



2541 Lumbocare Eco high

Uzun lumbosakral bel korsesi
(metal balenli)

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler,

akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikler

Esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlandıran metal balenler



2511 Abdominocare Eco

Karın korsesi

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Abdominal bölge operasyonu sonrası

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler. Abdominal duvarı korur ve cerrahi sonrası iyileşmeyi destekler.

Özellikler

Esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi



2710 Dasicare maternity

Hamile korsesi

cm	
	S : 70-85 M : 85-100 L : 100-115

Endikasyon

Akut ve kronik bel ağrıları, dejeneratif omurga problemleri, paravertebral kas spazmı, mekanik bel ağrısı, lumbal instabilite.

Etki Mekanizması

Lumbosakral bölgedeki yumuşak doku ve yapıları destekler, özellikle rotasyon

yönündeki hareketleri hafifçe limitler.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi hafif sınırlandıran plastik balenler



2535 Lumbocare Q

Lumbosakral bel korsesi
(fleksible balenli)

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Akut ve kronik bel ağrıları, dejeneratif omurga problemleri, paravertebral kas spazmı, mekanik bel ağrısı, lumbal instabilite.

Etki Mekanizması

Lumbosakral bölgedeki yumuşak doku ve yapıları destekler, özellikle rotasyon yönündeki hareketleri hafifçe limitler.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi hafif sınırlandıran plastik balenler



2810 Back support wool

Bel korsesi (yün)

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Romatizma, siyatik, post-travmatik durumlar

Etki Mekanizması

Kan akışını azaltır, ağrıları azaltır ve ısı artışı sağlar.

Özellikler

Yüksek kaliteli ve esnek angoret yün kumaş



4320 Manucare active

El bilek ateli

cm	sol/sağ
	XS : 13-14 S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Endikasyon

El bileği zorlanmaları, alt uç kınkları alçı sonrası, tenosinovit, karpal instabiliteler

Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi



3026 Shoulder support

Omuzluk

cm	S
	S : 28-32 M : 32-35 L : 35-38

Endikasyon

Hafif dereceli omuz çıkıkları, ağrılı omuz ve omuz bölgesinin inflamatuvar durumları.

Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için koruyucu bir pozisyon sağlar, omuz çevresi yumuşak dokuları destekler, omuz bölgesinde

sağlanan basınçla ileri düzey ödem oluşumunu engeller, proprioseptif geri bildirim sağlar.

Özellikler

Kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velkro ve ayarlanabilir esnek bant sistemi, üst kol ve omuz çevresini saran mükemmel anatomik yapı



2610 Dasicare active

Termal bel korsesi

cm	S
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Intervertebral kas spazmlarında, travma sonrası hematoma ve enflamasyonlarda, kompresyon amaçlı, bel ağrısı ve bel kaslarının zorlanması durumlarında

Etki Mekanizması

Lumbosakral bölgedeki

yumuşak doku ve yapıları destekler, özellikle rotasyon yönündeki hareketleri hafifçe limitler, kan akımını artırır, ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



5390 Thermal vest

Termal yelek

cm	L
	L : 90-100 XL : 100-110

Endikasyon

Azalmış gövde stabilizasyonu, kan dolaşımında yetersizlik ve ısınma amaçlı

Etki Mekanizması

Kan akımını artırır, ısı artışı sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite esnek ve yumuşak neopren materyal.



5380 Thermal pant

Termal tayt

cm	S
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Kalça, kasık ve bel bölgesini ilgilendiren zorlanma ve enflamasyonlar.

Etki Mekanizması

Kan akımını artırır, ısı artışı sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite esnek ve yumuşak neopren materyal.



5141 Groin support

Kasıklık

cm	sol/sağ
	S : 49-51 M : 51-54 L : 54-57 XL : 57-60

Endikasyon

Kalça çevresi kasların yaralanma ve gerilmeleri, kalça ekleminin stabilizasyonunu gerektiren durumlar

Etki Mekanizması

Kan akımını artırır, kasığı destekler ve ısı artışı sağlar, kasların esneme/gerilme

hareketlerini kolaylaştırır, proprioseptif etki oluşturur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, daha fazla uyum için ayarlanabilir genişlik, yüksek kalite neopren materyal.



6040 Thigh support

Uyluk desteği

cm	
S : 48-50	
M : 50-52	
L : 52-54	
XL : 54-56	
XXL : 56-58	

Endikasyon

Hamstring yada quadriceps kasını ilgilendiren yaralanmalar ile hamstring gerginliği, quadriceps kontüzyonu.

Etki Mekanizması

Kan akımını ve koordinasyonu artırır, uyluğu destekler ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, daha fazla uyum için ayarlanabilir genişlik, yüksek kalite neopren materyal.



6060 Calf support

Alt baldırlık

cm	
S : 31-33	
M : 33-35	
L : 35-37	
XL : 37-39	
XXL : 39-41	

Endikasyon

Kompartman sendromu, kontüzyonlar, shin splint, baldır ilgilendiren kas yaralanmaları

Etki Mekanizması

Kan akımını ve koordinasyonu artırır, baldırı destekler ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, daha fazla uyum için ayarlanabilir genişlik, yüksek kalite neopren materyal.



6157 Genucare knee jumper

Jumper's knee için dizlik

cm	
S : 30-35	
M : 35-40	
L : 40-45	

Endikasyon

Osgood schaltter, jumper's knee

Etki Mekanizması

Patellar tendona uyguladığı baskı sayesinde patellar ağrısı giderir, patellanın üstünden geçen bant sayesinde patellayı stabilize eder.

Özellikler

Dayanıklı bantlarla desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6158 Genucare Luxa

Lateral pedli dizlik

cm	
S : 30-35	
M : 35-40	
L : 40-45	

Endikasyon

Patellanın luksasyonu, patello-femoral ağrı, lateral bölge ameliyatı sonrası

Etki Mekanizması

Ped ve bantların yardımıyla diz kapağının stabilitesini sağlar, patellar tendon üzerindeki baskıyı azaltır.

Özellikler

Patella pedi ve dayanıklı bantlarla desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6876 Patellar tendon support

Patellar tendon bandı

universal

Endikasyon

Patello-femoral ağrı, diz ekleminin hafif instabilitesi

Etki Mekanizması

Ped yardımıyla proprioseptif etki yaratarak diz eklemine destek olur.

Özellikler

Patella pedi ile desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6120 Genucare basic

Dizlik

cm	
S : 30-33	
M : 33-36	
L : 36-39	
XL : 39-42	
XXL : 42-45	

Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, dizin diğer ağrılı durumları

Etki Mekanizması

Diz ekleminde kompresyon kuvveti oluşturur, diz eklemine destek verir ve ısı artışı sağlar, diz ekleminde oluşan stresi azaltır ve koordinasyonu artırır, proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6140 Genucare basic open

Patellası açık dizlik

cm	
S : 30-33	
M : 33-36	
L : 36-39	
XL : 39-42	
XXL : 42-45	

Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, patellofemoral ağrı

Etki Mekanizması

Kan akımını ve koordinasyonu artırır, diz eklemine destek verir ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6141 Genucare patella

Patella destekli dizlik

cm	
S : 30-33	
M : 33-36	
L : 36-39	
XL : 39-42	
XXL : 42-45	

Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, patellofemoral ağrı, instabilite

Etki Mekanizması

Ped özellikle diz kapağı ve dolayısı ile diz eklemine stabilitesinin artışı ve desteklenmesinde rol alır,

ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

Özellikler

Patella pedi ile desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6130 Genucare ligament

Patella destekli, flexible balenli dizlik

cm	
S : 30-33	
M : 33-36	
L : 36-39	
XL : 39-42	
XXL : 42-45	

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Diz eklemine stabilitesinin artırılmasını desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Dizliği çevreleyen velcro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yanlarda spiral balenler, yüksek kalite neopren materyal.



6135 Genucare ligament open

Flexible balenli dizlik (önden açık model)

cm	
S : 30-33	
M : 33-36	
L : 36-39	
XL : 39-42	
XXL : 42-45	

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Diz eklemine stabilitesinin artırılmasını desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Önde kapanan pratik velcro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda spiral balenler, yüksek kalite neopren materyal.



6160 Genucare hyperX

Hiper ekstansiyonu engelleyen çelik balenli dizlik

cm	
S : 30-33	
M : 33-36	
L : 36-39	
XL : 39-42	
XXL : 42-45	

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz eklemine stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler,

proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

Özellikler

Arkada hiper-ekstansiyonu engelleyen çapraz bantlar ve önde kapanan pratik velcro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklem, yüksek kalite neopren materyal.



6150 Genucare stable

Patella destekli, çelik balenli dizlik

cm	
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler,

proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

Özellikler

Dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım Dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yanlarda poli-sentrik eklem, yüksek kalite neopren materyal.



6155 Genucare stable open

Çelik balenli önden açık dizlik

cm	
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini

sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Önde kapanan pratik velkro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklem, yüksek kalite neopren materyal.



6121 Genucare basic light

Dizlik

cm	
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, dizin diğer ağrılı durumları

Etki Mekanizması

Diz ekleminde kompresyon kuvveti oluşturur, diz ekleminde destek verir ve ısı artışı sağlar,

diz ekleminde oluşan stresi azaltır ve koordinasyonu artırır, proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, neopren materyal.



6131 Genucare ligament light

Patella destekli, flexible balenli dizlik

cm	
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilitesinin artırılmasını desteklenmesini

sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yanlarda spiral balenler, neopren materyal.



6911 Genucare Easy

Örme dizlik

	A	B
XS	: 41-43	28-31
S	: 43-46	31-34
M	: 46-49	34-37
L	: 49-52	37-40
XL	: 52-56	40-43
XXL	: 56-58	43-46

Endikasyon

Postartroskopi ve postoperatif durumlar dahil dizin tüm enflamasyon ve zorlanmaları, kas ve bağ zorlanmaları, bursitler, kronik dejeneratif eklem hastalıkları, osteoartrit ve romatoid artrit

Etki Mekanizması

İrrite olmuş eklemi rahatlatır ve sabit bir kompresyon

uygulayarak, hastanın hareketleriyle oluşan masaj etkisinin de katkısıyla dizi çevreleyen yumuşak dokulara kan akımını artırır, proprioseptif etki yaratır.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip örme sistem, yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım.



6510 Knee support wool

Yün dizlik

cm	
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

Romatizma, diz ağrıları, dizin sıcak tutulması gereken durumlar

Etki Mekanizması

Diz ekleminde kompresyon kuvveti oluşturur, diz ekleminde destek verir ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki yaratır.

Özellikler

Yüksek kaliteli ve esnek angoret yün kumaş



7410 Foot guard

Ayak / ayak bileği ortezi

ayakabı no	
S : 34-37	
M : 38-41	
L : 41-45	

Endikasyon

Ayağın pozisyonlanmasını gerektiren durumlar, parmak ülseri riski, kronik ayak bileği instabilitesi

Etki Mekanizması

Kolay ayarlanabilir T biçimli sabitleyici ayağı istenen pozisyonunda tutar, ayağın dinlendirilmesini sağlar

Özellikler

Konforlu, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay takılıp çıkarılabilen pratik velcro sistemi, yıkanabilen yüksek konforlu ped.



7420 Malleocare step

Ayak bileği ortezi

universal

Endikasyon

Kronik ayak bileği bağ yaralanmalarının post operatif ve konservatif tedavisi, ayak bileği distorsiyonu

Etki Mekanizması

Pronasyon ve supinasyonda ayak bileğini stabilize eder.

Özellikler

Yıkanabilen yüksek konforlu pedlerle mükemmel kullanım rahatlığı, kolay takılıp çıkarılabilen pratik velcro sistemi



7430 AFO

Ayak / ayak bileği ortezi

ayakabı no	sol /sağ
S : 34-37	
M : 38-41	
L : 41-45	

Endikasyon

Düşük ayak, bağ yaralanmalarının post-operatif tedavisi, peroneal nöropati,

Etki Mekanizması

Ayak bileğinin plantar fleksiyonunu sınırlar, ayağı doğru pozisyonunda tutar, baldır destekler, yarı-rigid ince tasarımı ile rahatlık sunar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş, ayakkabı ile kullanılabilen, temizliği kolay ve hafif tasarım, kolay takılıp çıkarılabilen pratik velcro sistemi.



7210 Foot lifter

Dorsi-fleksiyon ayak bileği ortezi

universal

Endikasyon

Düşük ayak, peroneal nöropati

Etki Mekanizması

Ayağı doğru pozisyonunda tutarak, destekler ve yürümeyi kolaylaştırır.

Özellikler

Konforlu, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay takılıp çıkarılabilen pratik velcro sistemi.



7675 Malleocare form

Termoplastik destekli ayak bilekliği

cm	
S : 20-22	
M : 22-24	
L : 24-26	
XL : 26-28	
XXL : 28-30	

Endikasyon

Stabil malleol kırıkları, stabilizasyon gereken durumlar (instabilite), ayak bileği medial ve lateral bağ yaralanmaları, ayak bileği distorsiyonu, post-op dönemde stabilizasyon amaçlı

Etki Mekanizması

Ayak bileğini stabilize eder.

Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, yüksek kalite neopren materyal.



7640 Malleocare stable

Plastik destekli ayak bilekliği

cm	
S : 20-22	
M : 22-24	
L : 24-26	
XL : 26-28	
XXL : 28-30	

Endikasyon

Stabil malleol kırıkları, kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, post operatif bakım, eklem effüzyonu

Etki Mekanizması

Ayak bileğini koruyarak hareket olanağı sağlar, ayak bileğini stabilize eder.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, malleolleri koruyan ve destekleyen plastik splint ve yüksek kalite neopren materyal.



7620 Malleocare basic

Ayak bilekliği

cm	
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Ayak bileği tendinitleri, ayak bileği ödemleri, artrit ve osteoartrit, bağ zayıflıklarında kompresyon amaçlı

Etki Mekanizması

Kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, esnek yapısı ile ayakkabı içine kolaylıkla giyilebilir.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, yüksek kalite neopren materyal.



7630 Malleocare flex

Malleol destekli ayak bilekliği

cm	
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, eklem effüzyonu

Etki Mekanizması

Kompresyon sağlar, malleol bölgedeki ped masaj etkisi ile kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, ayak bileğini stabilize eder

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, malleoleri destekleyen pedler ve yüksek kalite neopren materyal.



7911 Malleocare Easy

Örme ayak bilekliği

cm	
XS	: 17-20
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Ayak bileğinin enflamasyon ve zorlanmaları, kas zorlanmaları, ezilme, spor aktivitelerinde profilaktik amaçlı

Etki Mekanizması

Elastik örme irrite olmuş eklemi rahatlatır ve sabit bir kompresyon uygulayarak, hastanın hareketleriyle oluşan

masaj etkisinin de katkısıyla eklemi çevreleyen yumuşak dokulara kan akımını artırır.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş bilek kıvrım dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım.



7530 Ankle support light

Ayak bilekliği

cm	
XS	: 17-20
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Ayak bileği tendinitleri, ayak bileği ödemleri, artrit ve osteoartrit, bağ zayıflıklarında kompresyon amaçlı

Etki Mekanizması

Elastik dokuma propriozeptif etki sağlar, kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır.

Özellikler

Ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilen hafif ve esnek dokuma.



7621 Ankle support short

Ankle support

cm	
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Ayak bileği tendinitleri, ayak bileği ödemleri, artrit ve osteoartrit, bağ zayıflıklarında kompresyon amaçlı

Etki Mekanizması

Kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, esnek yapısı ile ayakkabı içine kolaylıkla giyilebilir.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, neopren materyal.



7130 Metatarsal cushion

Metatarsal silikon ped

universal

Endikasyon

Transvers arkin desteklenmesi gereken durumlar, metatars başı hassasiyetleri, metatars başı kolloziteleri, metatarsalji

Etki Mekanizması

Metatars bölgesinde yastık görevi yapar ve yükü dağıtır.

Özellikler

Rahatça giyilebilen ve kaymayan örme materyal, anatomik olarak şekillendirilmiş ve yerleştirilmiş silikon destek.



7191 Hallux valgus combo

Hallux valgus gece ateli

sol/sağ
universal

Endikasyon

Halluks valgusun konservatif tedavisinde ve cerrahi sonrasında

Etki Mekanizması

Parmağı etkili bir şekilde çektiler başparmak eklemlerindeki yükü azaltır ve parmağın doğru pozisyon

almasına yardımcı olur.

Özellikler

Basit ve etkili tasarım, esnek velkro bantlar ile sağlanan mükemmel konfor ve kullanım kolaylığı, ayakkabı ile kullanılabilen hafiflik, daha uzun bantlarla gece için sağlanan ekstra stabilizasyon.



7190 Hallux valgus light

Hallux valgus gündüz ateli

sol/sağ
universal

Endikasyon

Halluks valgusun konservatif tedavisinde ve cerrahi sonrasında

Etki Mekanizması

Parmağı etkili bir şekilde çektiler başparmak eklemlerindeki yükü azaltır ve parmağın doğru pozisyon

almasına yardımcı olur.

Özellikler

Basit ve etkili tasarım, esnek velkro bantlar ile sağlanan mükemmel konfor ve kullanım kolaylığı, ayakkabı ile kullanılabilen hafiflik.



7140 Toe seperator

Silikon parmak ayırıcı

ayakabı no	
S	: 36-38
M	: 39-41
L	: 42-44

Endikasyon

Halluks valgusun konservatif tedavisinde ve cerrahi sonrasında

Etki Mekanizması

Parmağı iterek başparmak eklemlerindeki yükü azaltır ve parmağın doğru pozisyon almasına yardımcı olur.

Özellikler

Rahat kullanılabilen kaymayan silikon destek.



92250 Underliners

Tabanlık

ayakabı no	
A	: 35-37
B	: 38-39
C	: 40-41
D	: 42-43
E	: 44-45

Endikasyon

Diabetik ayak, ayağın ağrılı durumları

Etki Mekanizması

Ayaktaki basıncın dağılımını düzenler ve topuk üzerindeki yükün azalmasını sağlar, ağrıyı azaltır.

Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden

üretimiştir, plantar yüzey üzerindeki şoku azaltmak için topukta ve arkada ekstra polimer içermektedir. Hafif tasarımı ile yürürken ve sert yüzeylerde rahatlık sağlar. Vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmez, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir. Daha fazla rahatlık ve uyum için makas yardımıyla kenarları şekillendirilebilir.



92100 Foot wedge

Pronasyon / supinasyon tabanlık

ayakabı no	
A	: 35-37
B	: 38-39
C	: 40-41
D	: 42-43
E	: 44-45

Endikasyon

Kalkanel varus ve valgus (iç/dış kama) durumları

Etki Mekanizması

Ayaktaki basıncın dağılımını düzenler ve topuk üzerindeki yükün azalmasını sağlar, ağrıyı azaltır.

Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, plantar yüzey

üzerindeki şoku azaltmak için topukta ve arkada ekstra polimer içermektedir. Hafif tasarımı ile yürürken ve sert yüzeylerde rahatlık sağlar. Vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmez, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir. Daha fazla rahatlık ve uyum için makas yardımıyla kenarları şekillendirilebilir.



92255 Thin insole

İnce tabanlık

ayakabı no	
A	: 34-36
B	: 37-40
C	: 41-44
D	: 44-46

Endikasyon

Diabetik ayak, ayağın ağrılı durumları

Etki Mekanizması

Ayaktaki basıncın dağılımını düzenler ve topuk üzerindeki yükün azalmasını sağlar, ağrıyı azaltır.

Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, plantar yüzey

üzerindeki şoku azaltmak için topukta ve arkada ekstra polimer içermektedir. Hafif tasarımı ile yürürken ve sert yüzeylerde rahatlık sağlar. Vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmez, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir. Daha fazla rahatlık ve uyum için makas yardımıyla kenarları şekillendirilebilir.



7110 Silicon insole

Silikon tabanlık

ayakabı no	S : 36-38
	M : 39-40
	L : 41-42
	XL : 43-44
	XXL : 45-46

Endikasyon

Pes planus, genel topuk ağrıları, plantar fasiit, fat padin ağrılı durumları, artralji

Etki Mekanizması

Ayak ağrılarının azaltılmasına yardımcı olur.

Özellikler

Şok absorbe edici mavi noktali bölgeler, hava geçirgen sistem, anatomik olarak şekillendirilmiş taban yapısı ve ark desteği, mükemmel silikon kalitesi



7120 Heel cup

Silikon topukluk

ayakabı no	S : 36-38
	M : 39-41
	L : 42-44

Endikasyon

Aşilodini-tendomiopati, topuk dikenini, haglund deformasyonu, plantar fasiit, kalkaneal ağrı

Etki Mekanizması

Kalkaneel kemik etrafında yumuşak bir doku oluşturur,

topuk dikeninde basıncı azaltır.

Özellikler

Şok absorbe edici mavi noktali bölgeler, anatomik olarak şekillendirilmiş topuk yapısı, mükemmel silikon kalitesi



92260 Longitudinal arch support

Longitudinal ark desteği

ayakabı no	S : 36-38,5
	M : 39-43,5
	L : 44+

Endikasyon

Pes planus, pes kavus, longitudinal arkin desteklenmesi gereken durumlar

Etki Mekanizması

Longitudinal arki destekler, rahatlık sağlar.

Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, hafif tasarımı ile yürürken rahatlık sağlar, vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmaz, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir.



92220 Bone spur pad

Epin topukluk

ayakabı no	S : 36-38,5
	M : 39-43,5
	L : 44+

Endikasyon

Topuk dikenini, genel topuk ağrıları, plantar fasiit, aşıl tendonu hassasiyetleri

Etki Mekanizması

Kalkaneel kemik etrafında yumuşak bir doku oluşturur, topuk dikeninde basıncı azaltır.

Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, hafif tasarımı ile yürürken rahatlık sağlar, vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmaz, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir.



92200 Heel wedge

Topuk yükseltici

ayakabı no	S : 36-38,5
	M : 39-43,5
	L : 44+

Endikasyon

Aşıl tendinitleri, kısmi ya da tam aşıl rüptürleri, aşıl tendonunun zorlanmaları, post-op aşıl rüptürleri, topuğun yükseltilmesi gereken durumlar, severe hastalığı

Etki Mekanizması

15 derecelik bir açı oluşturarak, ayaktaki basıncın dağılımını

düzenler ve topuk üzerindeki yükün azalmasını sağlar.

Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, hafif tasarımı ile yürürken rahatlık sağlar, vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmaz, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir.



92240 Tender foot pad

Metatarsal ped

ayakabı no	S : 36-38,5
	M : 39-43,5
	L : 44+

Endikasyon

Transvers arkin desteklenmesi gereken durumlar, metatars başı hassasiyetleri, metatars başı kollozitetleri, metatarsalji

Etki Mekanizması

Metatars bölgesinde yastık görevi yapar ve yükü dağıtır.

Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, hafif tasarımı ile yürürken rahatlık sağlar, vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmaz, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir.



7310 Insole 3/4 stable

Çelik destekli deri tabanlık

ayakabı no	0 : 33-34	4 : 41-42
	1 : 35-36	5 : 43-44
	2 : 37-38	6 : 45-46
	3 : 39-40	

Endikasyon

Pes planus, pes kavus, metatarsalji

Etki Mekanizması

Longitudinal arki destekler, metatars bölgesinde yastık görevi yapar ve yükü dağıtır.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş, üzeri yumuşak deri ile kaplanmış ve paslanmaz çelik ile desteklenmiştir. Metatars bölgesi daha fazla konfor için yastıkla desteklenmiştir. Çok dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlüdür.



7320 Insole 3/4

Kösele tabanlık

ayakabı no	35	40
	36	41
	37	42
	38	43
	39	44

Endikasyon

Pes planus, pes kavus, metatarsalji

Etki Mekanizması

Longitudinal arki destekler, metatars bölgesinde yastık

görevi yapar ve yükü dağıtır.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş, üzeri yumuşak kösele ile kaplanmıştır. Metatars bölgesi yastıkla desteklenmiştir.



Seal tight

Alçı koruyucu

Çocuk Kol (küçük, orta, büyük)
Çocuk Bacak (küçük, orta, büyük)
Kol (kısa, uzun, kısa-geniş)
Bacak (kısa, uzun, kısa-geniş)
Ayak Bileği



1911 Memory foam pillow

Boyun Yastığı



universal

Özellikler

Gerçek viskoda 3D kesim tekniği ile üretilmiştir. Örme kumaş nefes alır ve hava transferi sağlar Tümüyle hipo-alerjik ve anti bakteriyeldir

Kir, toz, leke tutmaz, bakteri oluşumuna izin vermez Terleme ile oluşan nemin hızla kurumasını sağlar Dokusu yumuşak ve göz alıcıdır, size konforlu bir kullanım sunar.



1912 Back pillow

Bel/sırt yastığı

universal

Özellikler

Kılıfı %100 polipropilenden üretilmiştir. Örme kumaş nefes alır ve hava transferi sağlar Tümüyle hipo-alerjik ve anti bakteriyeldir

Kir, toz, leke tutmaz, bakteri oluşumuna izin vermez Terleme ile oluşan nemin hızla kurumasını sağlar Dokusu yumuşak ve göz alıcıdır, size konforlu bir kullanım sunar.



1913 Sit pillow

Oturma simidi

universal

Özellikler

Kılıfı %100 polipropilenden üretilmiştir. Örme kumaş nefes alır ve hava transferi sağlar Tümüyle hipo-alerjik ve anti bakteriyeldir

Kir, toz, leke tutmaz, bakteri oluşumuna izin vermez Terleme ile oluşan nemin hızla kurumasını sağlar Dokusu yumuşak ve göz alıcıdır, size konforlu bir kullanım sunar.



B108 Frog splint

Parmak ateli-kurbağa

S
M
L



B10671 Strip splint

Parmak ateli-düz

universal



B109 Cot splint

Parmak ateli-beşik

S
M
L



B111 Baseball splint

Parmak ateli-beyzbol

S
M
L



B1070 Stax splints

Mallet parmak ateli

1	5
2	5.5
3	6
4	7



8120 Crutch

Alüminyum koltuk değneği

çocuk
yetişkin
maxi

Özellikler

Şekillendirildikten sonra özel olarak sertleştirilmiş ve mat eloksalla kaplanmış EN-6063 alaşımlı alüminyum boru

profilinden üretilmektedir, 17 cm'e kadar yükseklik ve 15 cm'e kadar elcek ayarlaması yapılabilir, mükemmel uyum için 3 farklı boyda üretilmektedir.



8130 Forearm crutch

Kanedyen koltuk değneği

universal

Özellikler

Mat eloksalla kaplanmış ve sertleştirilmiş EN-6063 alaşımlı alüminyum boru profilinden üretilmektedir,

plastik kolcağ tek parçadır, güvenli ve rahattır, 28 cm'e kadar yükseklik ayarlaması yapılabilir, gri ve mavi renkleri vardır.



8140 Cane

Denge bastonu

universal

Özellikler

Sertleştirilmiş ve mat eloksalla kaplanmış EN-6063 alaşımlı alüminyum profilden

üretilmektedir, elcekleri anatomik, rahat ve dayanıklıdır yüksekliği 22 cm'ye kadar ayarlanabilir.



8150 Tripode cane

Üç ayaklı denge bastonu

universal

Özellikler

Krom kaplanmış dayanıklı borudan üretilmektedir,

elcekleri anatomik, rahat ve dayanıklıdır, yüksekliği 20cm'ye kadar ayarlanabilir



8160 Quadripode cane

Dört ayaklı denge bastonu

universal

Özellikler

Krom kaplanmış dayanıklı borudan üretilmektedir,

elcekleri anatomik, rahat ve dayanıklıdır, yüksekliği 20cm'ye kadar ayarlanabilir



8215 Shower chair compact

Katlanır klozet yükseltici sandalye

universal

Özellikler

Portatiftir, kolayca katlanır, yüksekliği ayarlanabilir.



8180 Walker

Katlanır walker

universal

Özellikler

Şekillendirildikten sonra özel olarak sertleştirilmiş ve mat eloksalla kaplanmış EN-6063

alaşımlı alüminyum profilden üretilmektedir, kolay katlanır, taşınabilir, elcekleri anatomik, rahat ve dayanıklıdır



8190 Walker act

Hareketli katlanır walker

universal

Özellikler

Şekillendirildikten sonra özel olarak sertleştirilmiş ve mat eloksalla kaplanmış EN-6063

alaşımlı alüminyum profilden üretilmektedir, kolay katlanır, taşınabilir, elcekleri anatomik, rahat ve dayanıklıdır

Medikal Basınç (Varis) Çorapları

varicare





9111

Dizaltı burnu kapalı class 1

9115

Dizaltı burnu açık class 1

9211

Dizaltı burnu kapalı class 2

9215

Dizaltı burnu açık class 2



9121

Dizüstü burnu kapalı class 1

9125

Dizüstü burnu açık class 1

9221

Dizüstü burnu kapalı class 2

9225

Dizüstü burnu açık class 2



9131

Külotlu burnu kapalı class 1

9135

Külotlu burnu açık class 1

9231

Külotlu burnu kapalı class 2

9235

Külotlu burnu açık class 2



Endikasyonlar:


- Primer ve sekonder varikoze
- Derin venöz yetmezlik
- Tromboflebit
- Derin ven trombozunun önlenmesi ve derin ven trombozu sonrası komplikasyonlarının önlenmesi
- Kronik venöz damar yetmezliği
- Hamilelikteki varisler ve ödemler
- Ameliyattan ve yaralanmalardan sonraki ödemler
- Lenf ve lip ödemler
- Toplar damar ağrıları için önlemler
- Anjiyodisplazi
- Damar sertleşmesindeki tedaviyi destekleme
- Ven ameliyatlarından sonra hareketsizlik sonucu ortaya çıkan tıkanma durumları (artorojen tıkanma sendromu ve pareziler)

Kontraendikasyonlar:

- İleri evre arter hastalıkları
- İleri evre kalp yetmezliği
- İltihaplı flebit
- Venöz gangren

Önemli!

Kompresyon derecesinin muayene eden doktor tarafından belirlenmesi gereklidir. Tedavinin etkisi ve devamlılığı açısından, düzenli bir şekilde gerçekleştirilen doktor kontrolleri önerilmektedir.

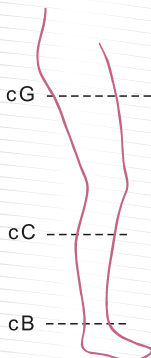

Çevre ölçüsü (cm)	Bedenler						
	1	2	3	4	5	6	7
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cC	28-34	30-37	32-40	34-43	36-46	38-49	40-51
cG	43-48	46-52	49-56	52-60	55-64	58-68	61-72

Artıccare



www.kosgeb.gov.tr

© Arden Medikal
30/03/2017
Baskı: Pelin Ofset



İvedik OSB 1357. Sokak
No:42 OSTİM 06370
Ankara TURKEY
Tel: (+90312) 394 14 54 (pbx)
Fax: (+90312) 394 14 57
bilgi@ardenmedikal.com.tr
www.orthocare.com.tr